

～劇物非該当試薬～

B-L液



■低濃度硫酸溶液、B-L液を開発

硫酸濃度を9%にし、劇物に該当しない試薬を開発しました。

■保管管理／廃棄が簡単に！

劇物非該当の本製品であれば、鍵付き保管庫での管理ではなく他の試薬と同様の保管管理が可能です。また、廃棄する際の処理が必要なく、試験終了後の手間が削減されます。

■指定計測法への換算機能

これまでと同様、指定計測法との相関を求め、回帰式を入力しておくことにより、指定計測法に換算した数値を表示できます。

B液よりも低い値を示めすものの、再現性は良好であり、手分析法との相関係数を求めることにより、指定計測法へ換算した測定値を求めることができます。

COD標準液


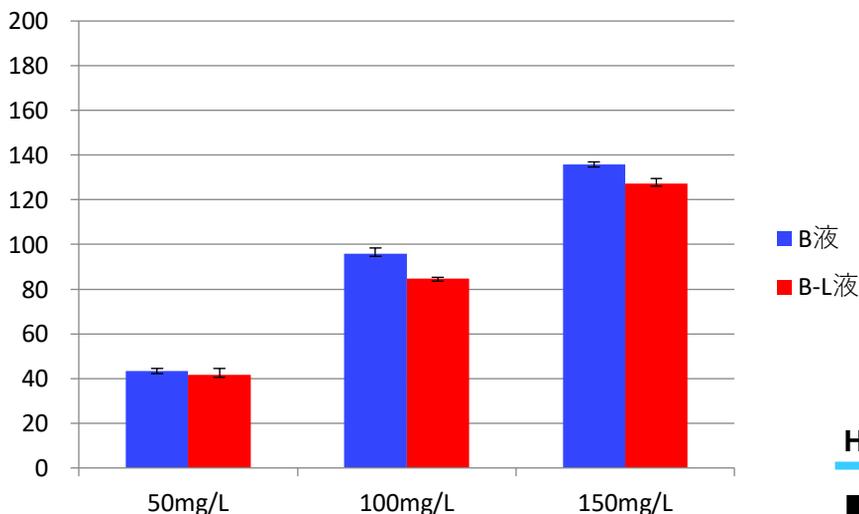


図1. COD標準液を使用したB液、B-L液の測定値比較データ

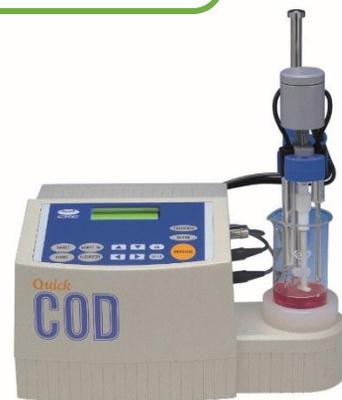

HC-607型専用試薬; B-L液

■商品コード: C00060613

■定価: 5,000円



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03(3812)9186(代) FAX. 03(3814)7538

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06(6392)1978(代) FAX. 06(6392)1971