

SIEVERS 分析計

製品アラート

Analytical Instruments
6060 Spine Road, Boulder
CO USA 80301
www.sieversinstruments.com

タイトル: InnovOx エアフィルターオプションの更新

文献番号: UPW 18-12、Rev A **リリース日:** 28-Nov-18


承認済み: 顧客分布

文献トピック:

より低コストのエアフィルターオプションが、InnovOx オンライン型でも使用可能になりました。InnovOx ラボ型のエアフィルターオプションは、ラボ型とオンライン型の両方に対応したより大きなカートリッジを使用するように変更されました。従来のエアフィルターオプションを使用しているラボ型に対し、新しい大きなカートリッジを使用するためのアップグレードキットをリリースします。

詳細:

InnovOx オンライン型用の新しいエアフィルターアップグレードキットは、分析計に供給するキャリアーガスからCO₂を除去するための前処理装置です。従来は再生式空気供給オプションのみが仕様できました。新しいオンラインエアフィルターアップグレードキットは、ラボ型と同じ消耗品であるエアフィルターカートリッジを使用し、1年間程度稼働できます。計装エアはIP56 キャビネットパージおよびエアフィルターオプションの両方に必要です。新しいエアフィルターオプションを使用しても、計装エアの供給は必要になります。この新しいオプションは、従来の再生式空気供給オプションと同じように、計装エアからCO₂を除去することを目的としていますが、インシヤルコストは低く抑えられています。

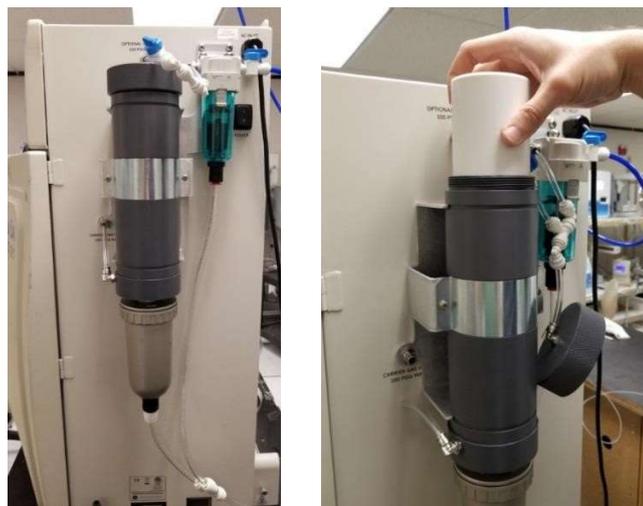

InnovOx オンラインエアフィルターアップグレードキット

InnovOx ラボ型 の製造番号 1810-0990 以降では、エアフィルターオプションに新しい、より大きなフィルタハウジングとカートリッジが設置されます。それ以前のラボ型は、新しいカートリッジを使用するために、より大きなフィルタハウジングにアップグレードする必要があります。新しいカートリッジは、消耗品の交換間隔を 3 ヶ月から 12 ヶ月に延長します。

新しい部品番号

APK 68656-01	InnovOx オンラインエアフィルターアップグレードキット - 大
APK 68555-01	InnovOx 交換用エアフィルターカートリッジ - 大
APK 68010-02	InnovOx Lab エアフィルターアップグレードキット - 大

廃止となる部品番号

APK 68120-01	InnovOx エアフィルターカートリッジ
--------------	-----------------------